




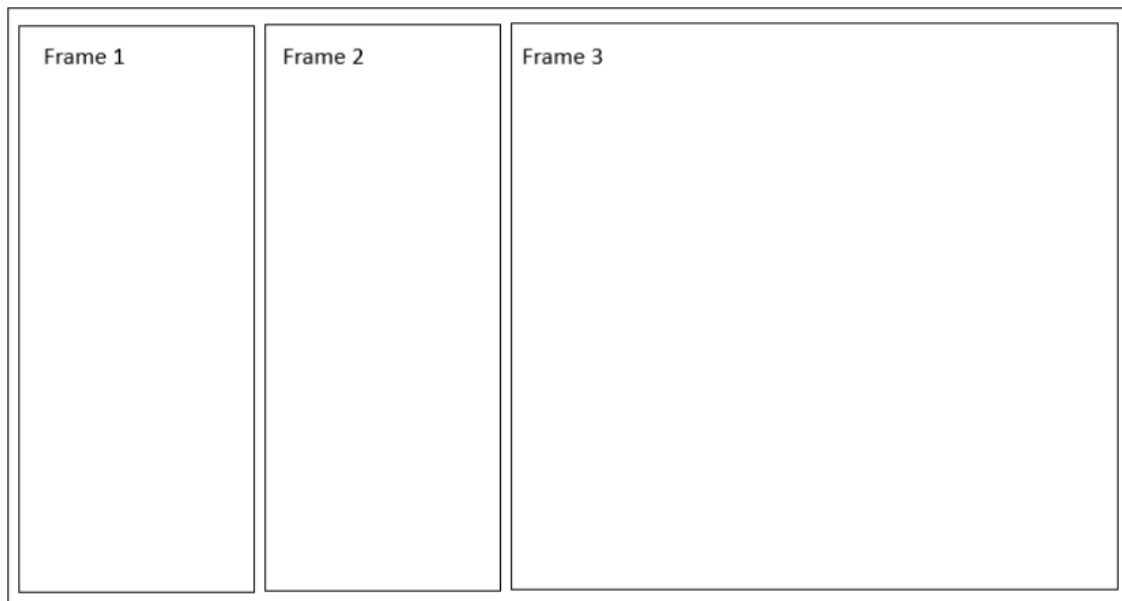

A janela terá três frames. Estou na dúvida se chamo frame o container.

No painel 1 Teremos as categorias. Quando o user clicar no botão import vai chamar a janela e esta será a visão para o user.

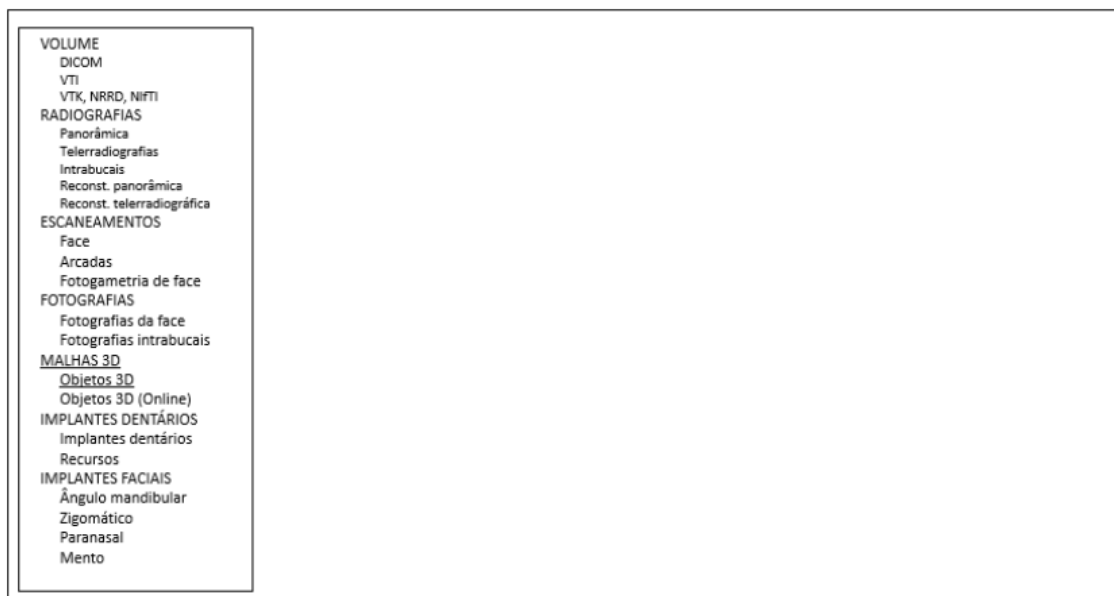

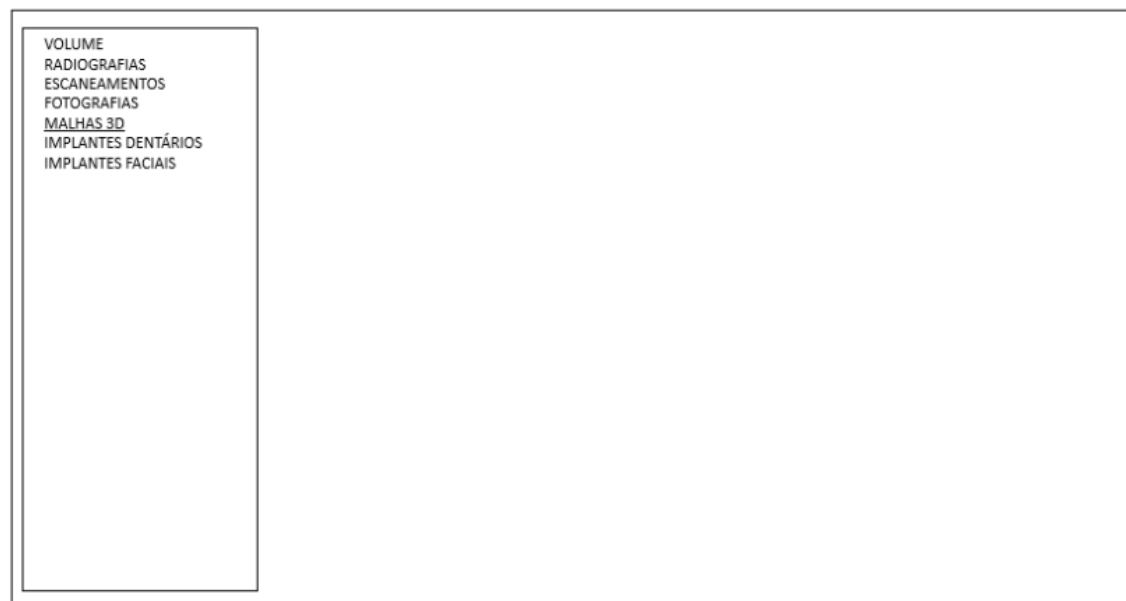

O conteúdo do painel 1 precisa permitir traduções. Ele deve ser expansível como Project Files do PyCharm, acho que devemos utilizar um listview. arrow_right.svg quando for: >; arrow_down.svg quando for v(circunflexo para baixo); A segunda imagem seria como se user tivesse ocultado todas as categorias.


Nomenclatura. VOLUME: Vamos chamar de categoria; DICOM, VTI: Subcategoria.

VOLUME DICOM VTI VTX, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	LOCAL: Do projeto Do arquivo
--	---

As categorias se o user clicar teremos apenas ação de expandir o ocultar as subcategorias. Se o user clicar nas subcategorias será carregado o segundo painel. Com as opções de local. Não gere código ainda. Quero que você entenda e planeje.

VOLUME DICOM VTI VTX, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	De onde importar: Do projeto Do arquivo	Volumes atuais do projeto: TC_Paciente_2183 Tamanho: 250 mb Criação: 22/04/2026 TC_Pré_2683 Tamanho: 150 mb Criação: 02/06/2026 TC_Pos_op_15-05-2026 Tamanho: 150 mb Criação: 02/06/2026 ↓ Importar

Se o user clicar em projeto. O terceiro painel será exibido. Com a lista dos volumes carregados no projeto.

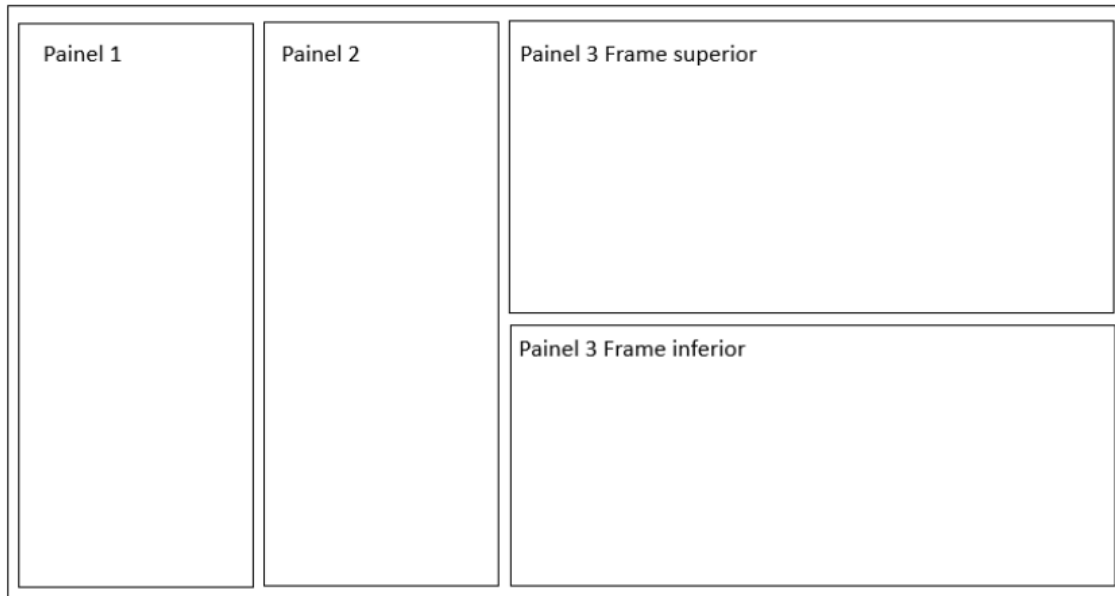

O painel 3 dependendo da categoria poderá ter dois frames (não sei se frame é o termo mais adequado).

VOLUME DICOM VTI VTI, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	De onde importar: Do projeto Do arquivo	Volumes atuais do projeto: TC_Paciente_2183 Tamanho: 250 mb Criação: 22/04/2026 TC_Pré_2683 Tamanho: 150 mb Criação: 02/06/2026 TC_Pos_op_15-05-2026 Tamanho: 150 mb Criação: 02/06/2026 ↓ Importar
--	--	---



VOLUME DICOM VTI VTK, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	De onde importar: Do projeto Do arquivo	Volumes atuais do projeto: TC_Paciente_2183 Criação: 22/04/2026 Tamanho: 250 mb TC_Paciente_2183 Criação: 25/05/2026 Tamanho: 150 mb ↓ Importar
		Preview: CT exam: Seios da face Patient's Weight: werwerw Manufacturer: Toshiba Scanner model: werttt kvp: 545wre Exposure time: 45 s 

Na seção superior, dependendo da categoria, teremos os ícones para exibir em forma de lista (menu.svg) ou em grid (grid.svg).

VOLUME DICOM VTI VTK, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	De onde importar: Do projeto Do arquivo	Volumes atuais do projeto: TC_Paciente_2183 Criação: 22/04/2026 Tamanho: 250 mb TC_Paciente_2183 Criação: 25/05/2026 Tamanho: 150 mb ↓ Importar
		Preview: CT exam: Seios da face Patient's Weight: werwerw Manufacturer: Toshiba Scanner model: werttt kvp: 545wre Exposure time: 45 s 

Quando o user selecionar o volume será exibido na seção inferior do painel 3 informações sobre o volume e uma previsão com um controle para percorrer os slices do volume. Depois o user poderá clicar no botão importar e o volume será carregado, validado.

Após o user selecionar o volume, este será validado e corrigido a orientação espacial.

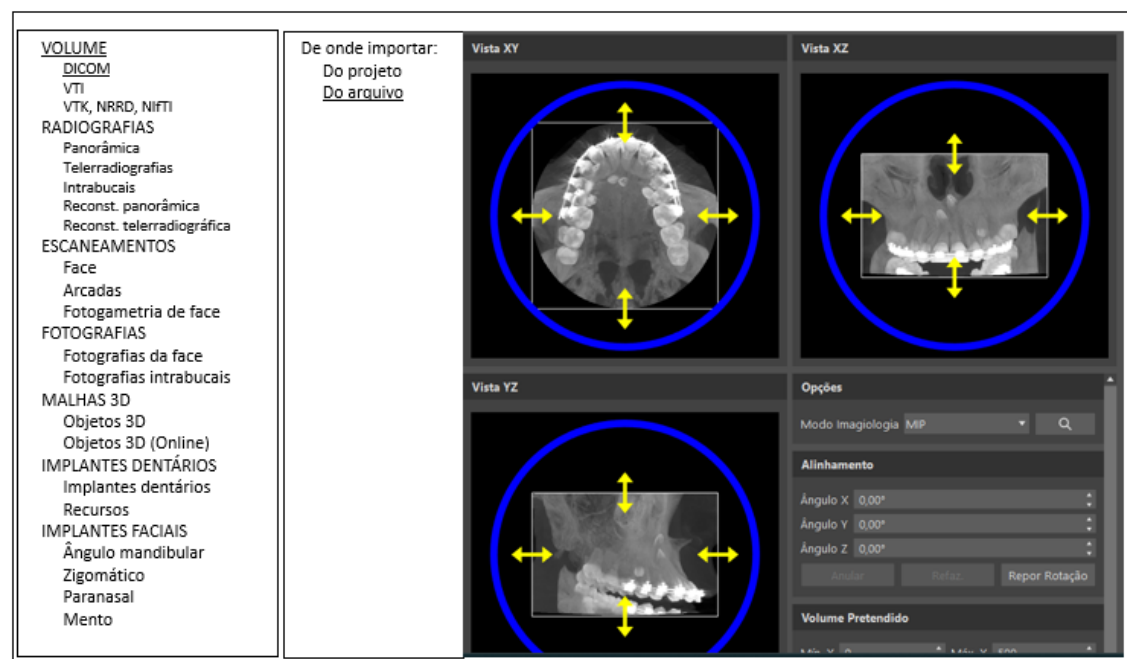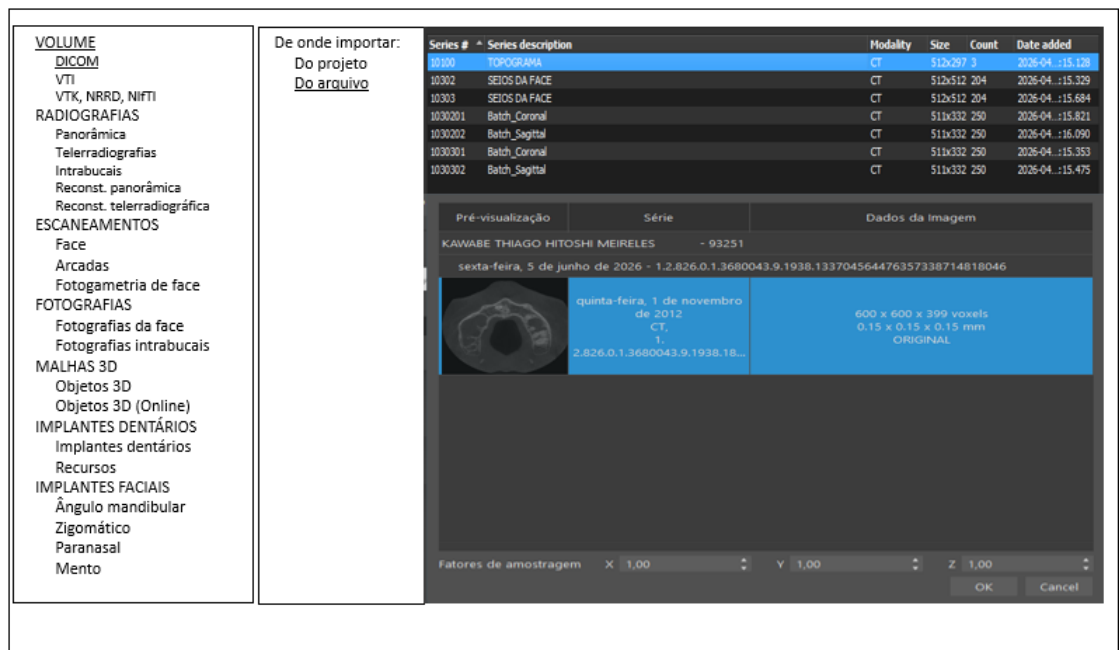


Após o user escolher o volume desejado, será exibida a tela de

Como ficaria a categoria Radiografias:


VOLUME DICOM VTK, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	De onde importar: Do projeto Do arquivo	Volumes atuais do projeto: Rad_Pan_8983 Criação: 22/04/2026 Tamanho: 5 mb Rad_Pan_8983 Criação: 25/05/2026 Tamanho: 15 mb Importar
		Preview: Dados da imagem: Tamanho: Criação: 


VOLUME DICOM VTK, NRRD, NIFTI RADIOGRAFIAS Panorâmica Telerradiografias Intrabucais Reconst. panorâmica Reconst. telerradiográfica ESCANEAMENTOS Face Arcadas Fotogrametria de face FOTOGRAFIAS Fotografias da face Fotografias intrabucais MALHAS 3D Objetos 3D Objetos 3D (Online) IMPLANTES DENTÁRIOS Implantes dentários Recursos IMPLANTES FACIAIS Ângulo mandibular Zigomático Paranasal Mento	De onde importar: Do projeto Do arquivo	Cancel Open Recent Home Documents Downloads Music Pictures Videos / Projects <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Size</th> <th>Modified</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>qtquickcontrols2-default.mp4</td> <td>211.7 kB</td> <td>13 Jun</td> </tr> <tr> <td>qtquickcontrols2-material-dark.mp4</td> <td>387.6 kB</td> <td>13 Jun</td> </tr> <tr> <td>qtquickcontrols2-material-light.mp4</td> <td>343.7 kB</td> <td>13 Jun</td> </tr> <tr> <td>qtquickcontrols2-universal-dark.mp4</td> <td>199.9 kB</td> <td>13 Jun</td> </tr> <tr> <td>qtquickcontrols2-universal-light.mp4</td> <td>202.5 kB</td> <td>13 Jun</td> </tr> </tbody> </table> Importar	Name	Size	Modified	qtquickcontrols2-default.mp4	211.7 kB	13 Jun	qtquickcontrols2-material-dark.mp4	387.6 kB	13 Jun	qtquickcontrols2-material-light.mp4	343.7 kB	13 Jun	qtquickcontrols2-universal-dark.mp4	199.9 kB	13 Jun	qtquickcontrols2-universal-light.mp4	202.5 kB	13 Jun
		Name	Size	Modified																
qtquickcontrols2-default.mp4	211.7 kB	13 Jun																		
qtquickcontrols2-material-dark.mp4	387.6 kB	13 Jun																		
qtquickcontrols2-material-light.mp4	343.7 kB	13 Jun																		
qtquickcontrols2-universal-dark.mp4	199.9 kB	13 Jun																		
qtquickcontrols2-universal-light.mp4	202.5 kB	13 Jun																		
Preview: CT exam: Seios da face Patient's Weight: werwerw Manufacturer: Thosiba Scanner model: werttt kVp: 545wre Exposure time: 45 s 																				

Se o user clicar no painel 2: Do arquivo o painel será diferente. Na seção superior teremos um FileDialog Personalizado e na seção inferior um painel de preview com informações do volume selecionado.

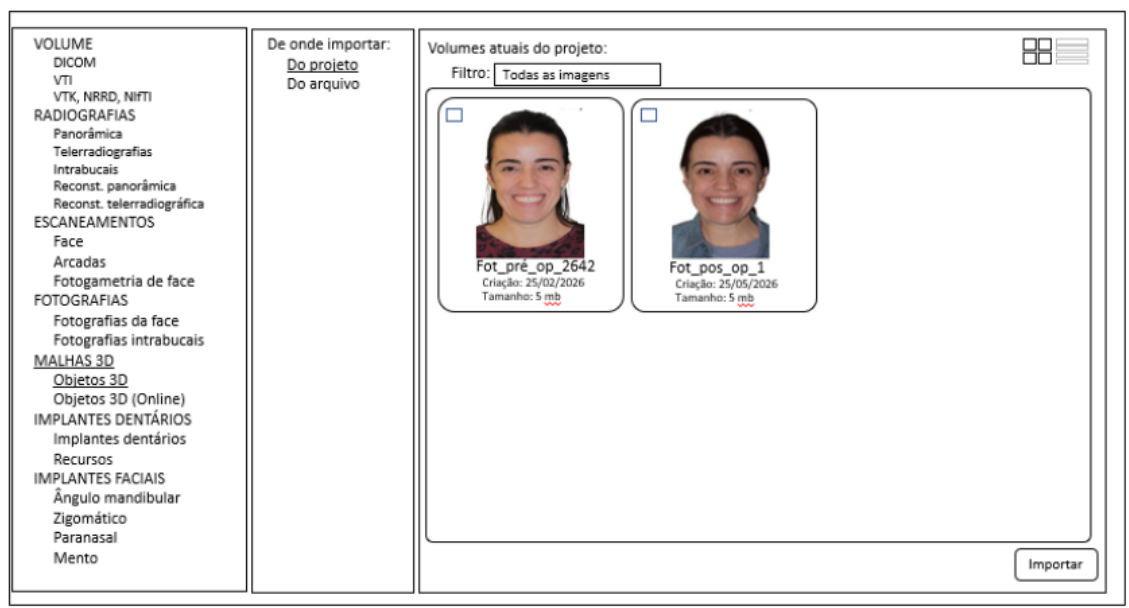

Na categoria fotografias o painel 3 funcionar como um album de fotografias. Teremos um filtro com um combobox para filtros (Fotografias pré-operatórias, pós, Face, Intrabucais etc.) O quadrado próximo da borda é para seleções múltiplas.

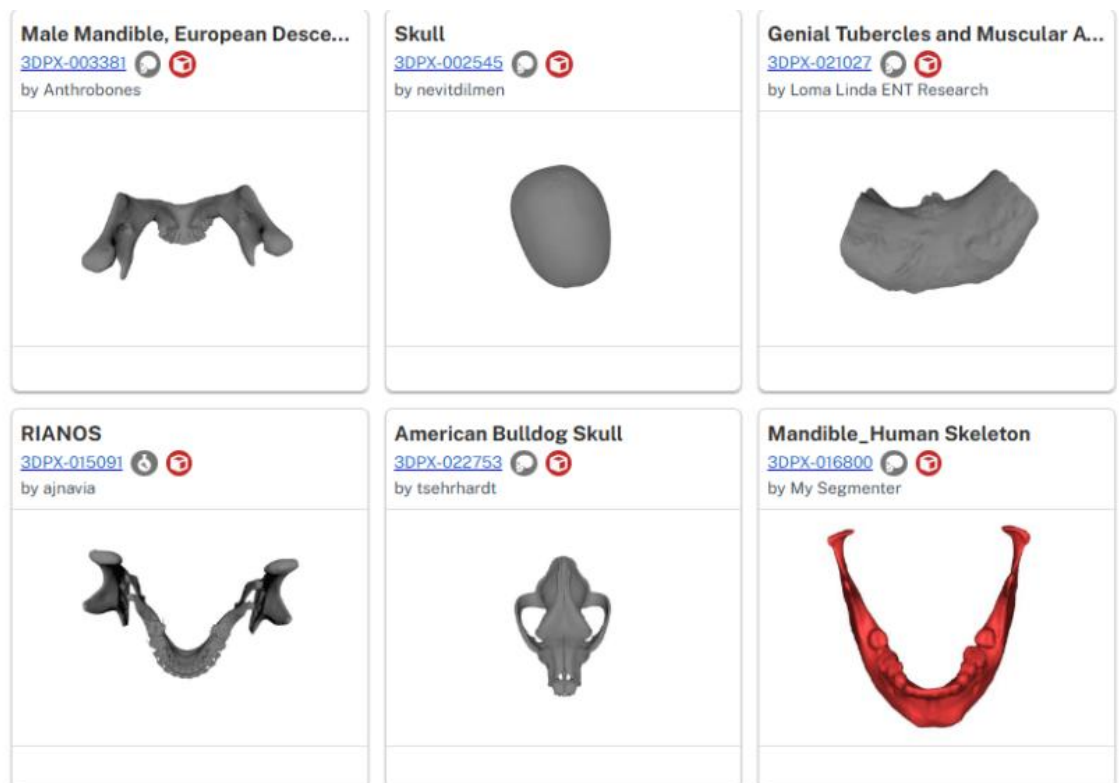

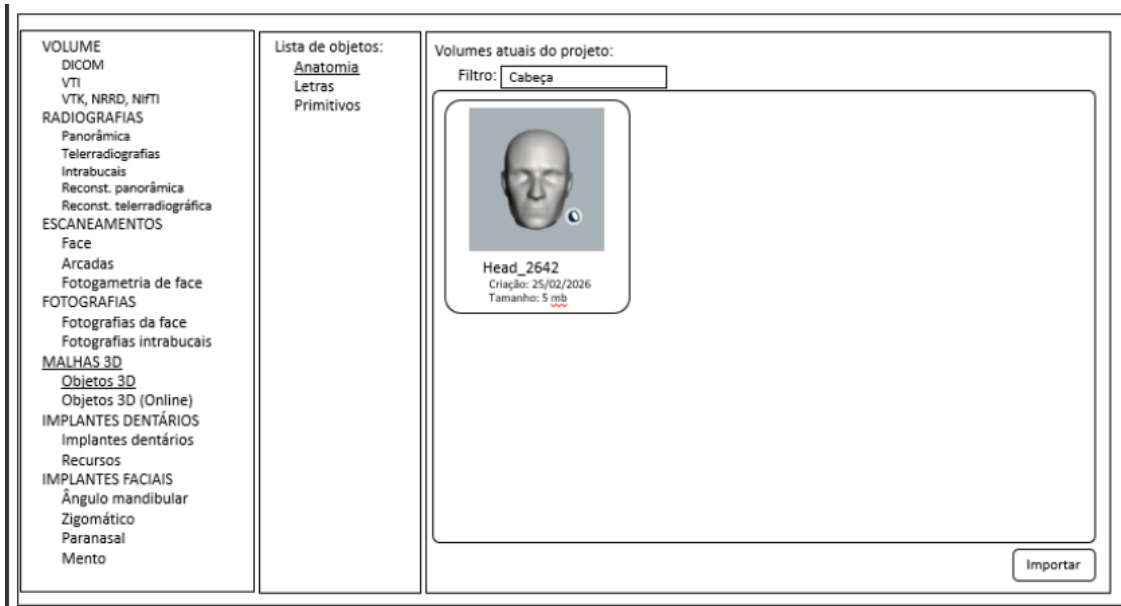

Malhas 3d também vai funcionar como um catalago ou uma biblioteca 3d como em bibliotecas online de modelos 3d para download. Aqui também teremos um combobox para filtros. Exemplo: Anatomia (Mandíbula, Maxila,), Primitivos (Cubo, Esferas etc..)

As categoriais Implantes dentários e Implantes Faciais também teremos um modelos de catalago como na categoria Malhas 3d.